



AL PASA NEN
POWERED BY SOFT N.W.

SCHEDA TECNICA

MASCHERINA FACCIALE AD USO MEDICO


CLASSE 1 DI TIPO II



AL PASA NEN
POWERED BY SOFT N.W.



**100% MADE
IN ITALY**

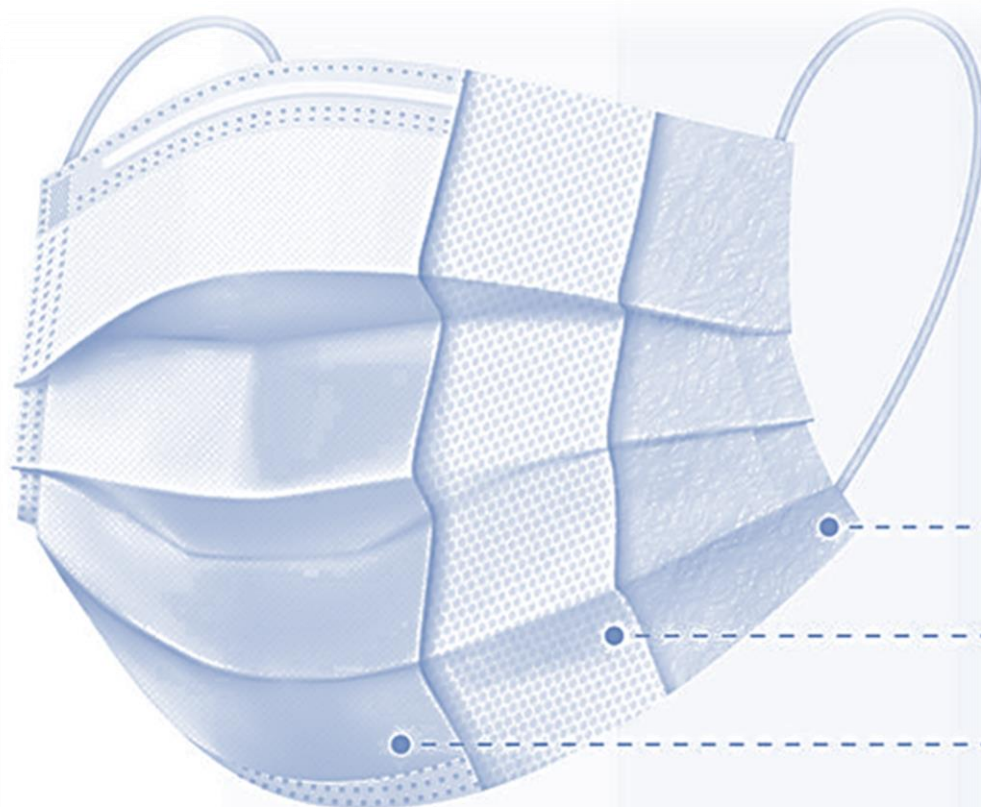

La mascherina **Al Pasa Nen** (in Piemontese "Non Passa") viene realizzata con due strati di tessuto non tessuto spunbonded prodotti da **Soft N.W.** stessa col l'aggiunta di uno strato di tessuto non tessuto meltblown di fornitura italiana che garantisce alti standard di filtrazione.

Lo strato interno studiato appositamente da **Soft N.W.** garantisce una maggior compattezza, evitando i fastidiosi filamenti volanti che spesso si formano durante l'utilizzo delle mascherine.

Layer interno in tessuto non tessuto spunbonded anti-pilling

Layer intermedio in tessuto non tessuto meltblown

Layer esterno in tessuto non tessuto spunbonded



100% MADE
IN ITALY

La mascherina **Al Pasa Nen** viene realizzata secondo rigidissimi standard qualitativi e **Soft N.W.** offre una serie di garanzie:

- Produzione in Camera Bianca ISO 8 per minimizzare il rischio di contaminazione batterica
- La filtrazione batterica supera il 99%
- Lo strato interno anti-pilling limita al minimo il rilascio di filamenti che si possono formare con lo sfregamento sul volto
- Il laboratorio interno svolge continui test per certificare la continuità del prodotto
- Il 60% della materia prima viene realizzata direttamente da Soft N.W. Che può così controllarne la qualità in ogni passaggio
- Il tessuto non tessuto di Soft N.W. È certificato Oeko-Tex per il contatto con la cute
- Il ogni componente della mascherina è prodotto in Italia
- Soft N.W. si avvale dei migliori laboratori accreditati per eseguire i test sulle sue mascherine
- Soft N.W. sta implementando le ISO 9001 e 13485 per la produzione di Medical Devices (fine Febbraio 2021)



100% MADE
IN ITALY

Soft N.W. è stata autorizzata dall'Istituto Superiore di Sanità per la produzione e commercializzazione con il riferimento COV1744 e con il numero di protocollo 0000830/COV-DM-D42 – 13/01/2021.

I risultati dei test di laboratorio hanno certificato:

- BFE (Efficienza di Filtrazione Batterica) = 99,5% - Norma UNI EN 14683:2019
- BioBurden (Pulizia Microbica) = UFC < 1 - Norma UNI EN 14683:2019
- Delta P (Pressione Differenziale) = 31 Pa/cm² - Norma UNI EN 14683:2019



AL PASA NEN
POWERED BY SOFT N.W.

La mascherina Al Pasa Nen viene imbustata in film Coex alimentare sigillato per garantire la massima sicurezza del prodotto una volta imballato.

All'interno delle buste viene inserito un opuscolo in cartone con tutte le informazioni necessarie all'utilizzatore.



**100% MADE
IN ITALY**



3 STRATI DI PROTEZIONE

AL PASA NEN
POWERED BY SOFT N.W.

100% MADE IN ITALY

**MASCHERINA FACCIALE
AD USO MEDICO** 10 pcs

AL PASA NEN PIEGA 2 –MAS004
MODELLO PER ADULTO
Mascherina Facciale ad Uso Medico di Tipo II secondo la norma UNI EN 14683:2019
realizzata ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, modificato dalla legge 17 luglio 2020 n°77

Composizione: 2 veli di tessuto non tessuto spunbonded in polipropilene, 1 strato di tessuto non tessuto meltblown in polipropilene, 2 elastici in elastomero e poliestere, 1 ponte nasale in polipropilene con anima in acciaio



Prima dell'utilizzo della mascherina, lavarsi le mani.
Indossare la mascherina con le pieghe rivolte verso il basso e l'insero metallico verso l'alto. Far aderire la mascherina al viso posizionando gli elastici dietro le orecchie.
Prima di rimuovere la mascherina lavarsi nuovamente le mani.


MANTENERE LE MASCHERINE ALL'INTERNO DELLA CONFEZIONE LONTANO DA FONTI DI CALORE O DAL CONTATTO DIRETTO CON RAGGI SOLARI O UV.



SOFT
NONWOVENS SOFT N.W. S.p.A

Via Piave, 5 – Quaregna Cerreto (BI) 13854 – Italy
Tel +39 015 882200 - Fax +39 015 882135
softnw@softnw.com - www.softnw.com

Dopo l'uso, i dispositivi monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto, anche quando non sono stati utilizzati per finalità sanitarie, ma esclusivamente di pulizia dei locali non sanitari potenzialmente contaminati. Per le "abitazioni" in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, si raccomanda di mantenere le procedure in vigore nel territorio di appartenenza non interrompendo la raccolta differenziata. A scopo cautelativo le mascherine utilizzate dovranno essere smaltite nei rifiuti indifferenziati.



3 STRATI DI PROTEZIONE


AL PASA NEN
POWERED BY SOFT N.W.

100% MADE IN ITALY

**MASCHERINA FACCIALE
AD USO MEDICO** 10 pcs


AL PASA NEN PIEGA 2 –MAS004
MODELLO PER ADULTO
Mascherina Facciale ad Uso Medico di Tipo II secondo la norma UNI EN 14683:2019
realizzata ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, modificato dalla legge 17 luglio 2020 n°77

Composizione: 2 veli di tessuto non tessuto spunbonded in polipropilene, 1 strato di tessuto non tessuto meltblown in polipropilene, 2 elastici in elastomero e poliestere, 1 ponte nasale in polipropilene con anima in acciaio



Prima dell'utilizzo della mascherina, lavarsi le mani.
Indossare la mascherina con le pieghe rivolte verso il basso e l'insero metallico verso l'alto. Far aderire la mascherina al viso posizionando gli elastici dietro le orecchie.
Prima di rimuovere la mascherina lavarsi nuovamente le mani.

MANTENERE LE MASCHERINE ALL'INTERNO DELLA CONFEZIONE LONTANO DA FONTI DI CALORE O DAL CONTATTO DIRETTO CON RAGGI SOLARI O UV.



SOFT
NONWOVENS SOFT N.W. S.p.A

Via Piave, 5 – Quaregna Cerreto (BI) 13854 – Italy
Tel +39 015 882200 - Fax +39 015 882135
softnw@softnw.com - www.softnw.com

Dopo l'uso, i dispositivi monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto, anche quando non sono stati utilizzati per finalità sanitarie, ma esclusivamente di pulizia dei locali non sanitari potenzialmente contaminati. Per le "abitazioni" in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, si raccomanda di mantenere le procedure in vigore nel territorio di appartenenza non interrompendo la raccolta differenziata. A scopo cautelativo le mascherine utilizzate dovranno essere smaltite nei rifiuti indifferenziati.